Отчет по лабораторной работе №1

Исследование фотоэффекта и измерение постоянной Планка

Выполнили студенты 430 группы Сарафанов Ф.Г., Понур К.А., Сидоров Д.А.

Содержание

1	Teo	ретическая часть	2
2	Пра	ктическая часть	4
	2.1	Описание эксперимента	4
	2.2	Эксперимент	6
3	В Задание 1		7
	3.1	Задание 2	8
	3.2	Задание 3	9

1. Теоретическая часть

Фотоэффект

В настоящее время в науке, технике и быту широкое приме-нение получили фотоэлементы - электровакуумные или полу¬проводниковые приборы, преобразующие энергию электромагнитного излучения оптического диапазона в электрическую. Действие этих приборов основано на использовании фотоэлектрических эффектов (фотоэффектов). Существует два вида фотоэффекта: внешний и внутренний. Внешний фотоэффект (фотоэлектронная эмиссия) заключается в испускании поверхностью тела электронов во внешнее пространство (вакуум или газ) под действием падающей на эту поверхность световой энергии. Внутренним фотоэффектом называется изменение под действием световой энергии проводимости тел вследствие появления добавочных электронов проводимости, либо эффект разделения зарядов в облу-чаемом светом теле, что приводит к возникновению электродвижущей силы (фотогальванический эффект). Внешний фотоэффект используется в вакуумных и газонаполненных фотоэлементах, а также в фотоумножителях; внутренний - в полупроводниковых фотоэлементах: фото резисторах, фотодиодах и фототранзисторах (в том числе, в солнечных батареях). В данной работе исследуется внешний фотоэффект. При этом используется вакуумный фотоэлемент, имеющий два электрода катод, эмитирующий электроны под действием света, и анод - коллектор электронов. Если на анод подать положительный потенциал, то во внешней цепи прибора потечет ток, называемый фототоком. Величина фототока зависит от интенсивности света и материала катода. При увеличении потенциала анода фототок сначала увеличивается, а затем достигает насыщения (все электроны, испускаемые катодом, достигают анода, и при дальнейшем увеличении анодного напряжения величина тока не меняется). Основные законы внешнего фотоэффекта, установленные экспериментально, состоят в следующем.

- 1. Величина фототока в режиме насыщения при неизменном спектральном составе излучения прямо пропорциональна интенсивности падающего света (закон Столетова).
- 2. Для каждого вещества существует длинноволновая граница фотоэффекта λ_0 , за которой (при $\lambda > \lambda_0$) фотоэмиссия не наблюдается.
- 3. Максимальная кинетическая энергия электронов W_{max} при фотоэффекте линейно возрастает с увеличением частоты падающего света ν и не зависит от его интенсивности: $W \propto \nu$.

Эти законы просто объясняются на основании квантовой теории света и электронной теории твердого тела. Согласно квантовой теории, свет имеет дуальную природу: он обла-

дает не только волновыми свойствами, но и свойствами частиц и может быть представлен в виде потока квантов света (фотонов). Энергия одного фотона пропорциональна частоте соответствующей волны: $E=h\nu$, где h- постоянная Планка, по современным данным равная $6.6260755(40)\cdot 10^{-34}$ Дж·с

Излучение света на элементарном уровне идет отдельными квантами. Рассмотрим процесс фотоэмиссии из металла Поскольку каждый фотон действует на электроны твердого тела независимо от других фотонов, причем существует определенная вероятность того, что это действие приведет к эмиссии электрона, то при попадании на катод N фотонов в секунду электронный ток с него составит n=NP электронов в секунду. Интенсивность падающего на фотокатод света согласно квантовой теории также пропорциональна $N:I \propto Nhv$. Таким образом образом объясняется закон Столетова.

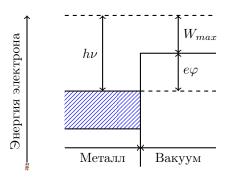


Рис. 1

Согласно электронной теории твердого тела, электроны проводимости в металле находятся в потенциальной яме и при достаточно низкой температуре равномерно распределены по энергиям, заполняя потенциальную яму до некоторого уровня (см. рис. 1). Наименьшая энергия, необходимая электрону для выхода в вакуум, называется работой выхода: $U_{\text{вых}} = e\varphi$, где - заряд электрона. То же название обычно употребляют и для потенциала φ , так как энергию в атомной физике принято измерять в электрон-вольтах. Максимальная энергия, которую может получить электрон при соударении с фотоном, равна $h\nu$. Очевидно, при $h\nu < e\varphi$ фотоэмиссия невозможна, что объясняет существование красной границы.

Из рис.1 также следует, что максимальная кинетическая энергия электрона равна

$$W_{max} = h\nu - e\varphi \tag{1}$$

Это уравнение (уравнение Эйнштейна) объясняет третий закон фотоэффекта. Электроны, выбиваемые с более глубоких энергетических уровней, имеют меньшую кинетическую энергию.

Максимальную кинетическую энергию электронов $W_{max}K$ можно определить, если между анодом и катодом фотоэлемента создать тормозящее электроны поле. Для этого на анод подается отрицательный по отношению к катоду потенциал V. Вылетевшие из фотокатода электроны имеют различные энергии. Те электроны, энергия которых удовлетворяет условию $W < e \cdot V$, не могут достичь анода. Поэтому при увеличении |V| фототок уменьшается. При некотором значении $V = V_3$ (потенциал запирания) даже наиболее быстрые электроны не смогут достичь анода, и ток прекратится. При этом

$$W_{max} = e \cdot V_3 \tag{2}$$

Из уравнений (1) и (2) найдём линейное соотношение между потенциалом запирания и частотой падающего света

$$V_3 = -\frac{h}{\nu}\nu - \varphi \tag{3}$$

Экспериментальная проверка формулы Эйнштейна была впервые осуществлена Ричардсоном и Комптоном в 1912 г., более тщательно - Милликеном в 1916 г. Обе работы подтвердили формулу (3). Наиболее точная проверка была проведена Лукирским и Прилежаевым в 1926г.

2. Практическая часть

2.1. Описание эксперимента

Целью работы является проверка законов фотоэффекту а также измерение фундаментальной константы - постоянной Планка - на основании соотношения (3) между потенциалом запирания V_3 и частотой света ν .

Схема установки приведена на рис. 2. Свет от лампы накаливания или ртутной лампы фокусируется конденсором на входную щель призменного монохроматора УМ-2. В монохроматоре свет через входную щель, регулирующую световой потом, падает на объектив коллиматора и параллельным пучком проходит диспергирующую призму. Ввиду того, что фокусное расстояние объектива для каждой длины волны изменяется, предусмотрена возможность фокусировки объектива коллиматора. Фокусировочное движение осуществляется маховичком и контролируется по миллиметровой шкале с нониусом. В трубе коллиматора между щелью и объективом помещен затвор, с помощью которого можно прекратить доступ света в прибор. Под углом 90° к падающему пучку света располагается выходная труба монохроматора. Поворачивая призменный столик на различные углы относительно падающего пучка света, получают свет различной длины волны, распространяющийся параллельно оси выходной трубы. Фокусируя свет в выходную плоскость, выделяют с

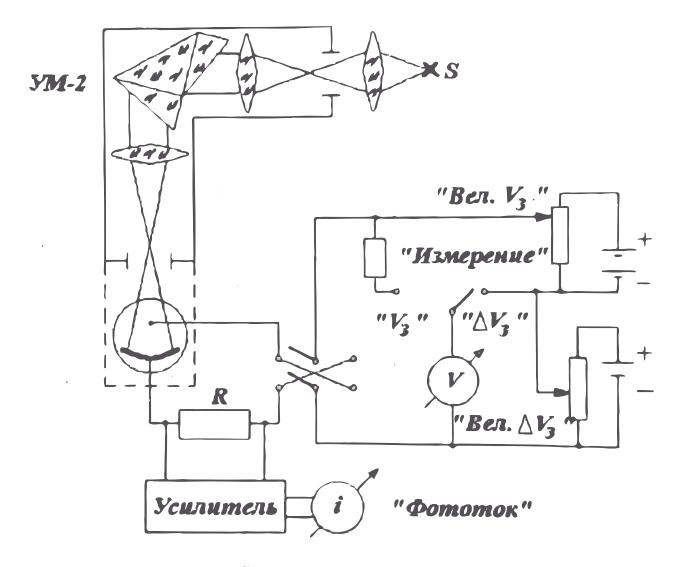


Рис. 2: Схема экспериментальной установки

помощью выходной щели узкий спектральный интервал. Прямо на выходной щели крепится фотоэлемент типа Ф-5, помещенный в металлический экран, предохраняющий от попадания паразитного света и от электрических наводок. Таким образом, поворачивая призму монохроматора, можно изменять частоту освещающего фотоэлемент света. На измерительном барабане поворотного механизма нанесены относительные деления-градусы поворота барабана. Отсчет читается против индекса, скользящего по спиральной канавке. Частота (длина волны) определяется по отсчету барабана монохроматора и градуировочному графику. Для градуировки прибора служит ртутная лампа.

Потенциал анода фотоэлемента можно менять с помощью двух потенциометров "Вел. V"и "Вел. ΔV ". Величина потенциала измеряется вольтметром при положении переключателя "Измерение"на "V"(шкала вольтметра при этом соответствует 2.5 В). В положении переключателя " ΔV "измеряется лишь часть анодного напряжения, подаваемая с потен-

циометра "Вел. ΔV " (шкала вольтметра на 0.25 В). Имеется переключатель знака анодного напряжения.

Возникающий в фотоэлементе ток при отрицательном потенциале анода (режим задержки) очень мал (порядка 10^{-11} A) и не может быть измерен непосредственно. Для его измерения служит балансный электрометрический усилитель. На вход усилителя подается напряжение, пропорциональное величине фототока, которое образуется на большом (порядка 10^9 Ом) сопротивлении R, включенном в цепь фотоэлемента. Поэтому показания микроамперметра на выходе усилителя пропорциональны величине фототока.

Потенциал запирания определяется величиной тормозящего электроны анодного напряжения в момент исчезновения фототока. Следует подчеркнуть, что измеренное V_3 отличается от истинного значения

$$V_0 = V_3 + C \tag{4}$$

Величина поправки С зависит от ряда факторов, важнейшим из которых являются наличие обратного тока, вызванного вторичной электронной эмиссией с анода, и контактная разность потенциалов между анодом и катодом. Это приводит к большой погрешности при определении постоянной Планка по зависимости V_3 от ν .

С целью увеличения точности опыта можно провести измерения для двух близких значений частоты света ν_1 и ν_2 . Если частоты достаточно близки, то поправка C практически не изменится (все остальные условия опыта останутся без изменения). Тогда разность $\Delta V_3 = V_3(\nu_2) - V_3(\nu_1)$ будет совпадать с разностью истинных потенциалов запирания и, согласно уравнению (3), для определения постоянной Планка можно воспользоваться соотношением

$$\Delta V_3 = -\frac{h}{e} \Delta \nu, \tag{5}$$

где $\Delta \nu = \nu_2 - \nu_1$.

В этом методе необходимо достаточно точно знать значения частот ν_1 и ν_2 . Точность определения частот по градуировочному графику монохроматора в случае применения источника белого света (лампа накаливания) невелика, поэтому необходимо использовать источник с линейчатым спектром, для которого частоты излучения измерены с высокой точностью. В данной работе применена ртутная лампа ДРШ-250.

2.2. Эксперимент

Для того, чтобы установить связь между шкалой монохроматора УМ-2 будем пользоваться рис. 3.




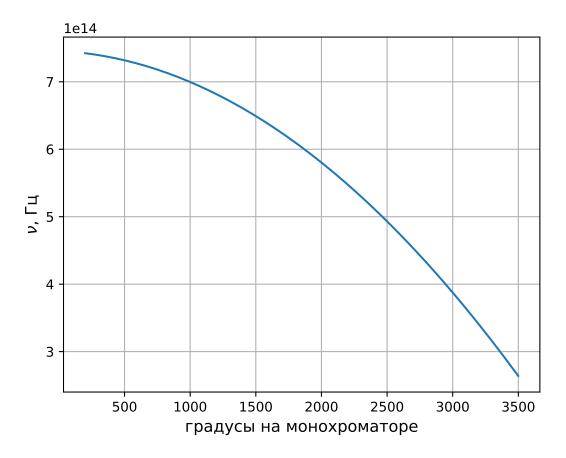


Рис. 3


3. Задание 1

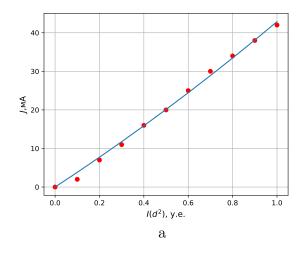

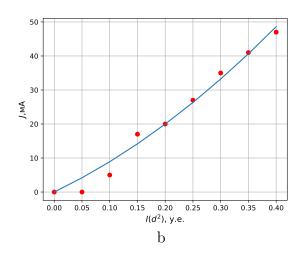

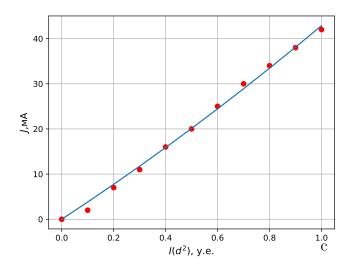

3.1. Задание 2

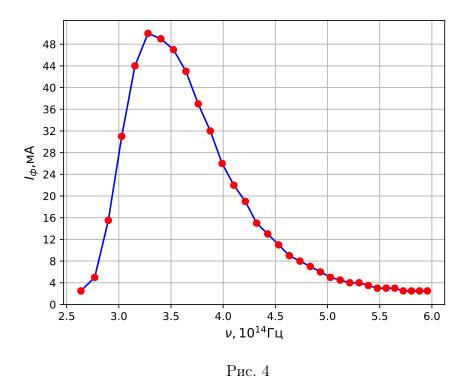

При постоянном напряжении на аноде мы снимали зависимость фототока от частоты падающего света. На рис. 4 видно, что то начинает течь только после $\nu*\approx 2.9\cdot 10^{14}$

 Γ ц. Эта ν * и есть частота красной границы фотоэффекта. При больших частотах мы приближаемся к напряжению запирания, поэтому ток уменьшается до нуля.

3.2. Задание 3

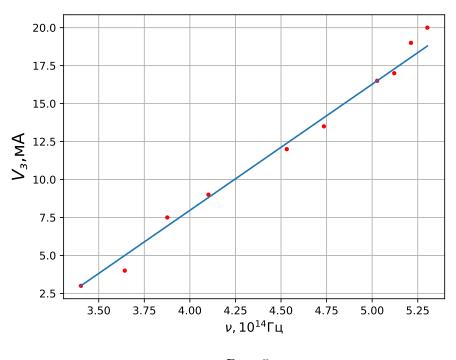


Рис. 5

Постоянную планка мы сможем найти из рис.5. Из 3 следует, что $\frac{h}{e}$, равняется тангенсу угла наклона прямой. Возьмем из справочника заряд электрона $e=1.60217733\cdot 10^{-19}~{\rm K}$ л и получаем, значение постоянной Планка $h=8.36\cdot 10^{-34}$ Дж · с.